

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen, Saksa
Sähköposti: info@kern-
sohn.com

Puhelin: +49-[0]7433-9933-0
Faksi: +49-[0]7433-9933-149
Kotisivu: www.kern-sohn.com

Käyttöohje **Mekaaninen pituusasteikko**

KERN MBA-A01

Versio 1.0
2018-08
FIN



MBA-A01-BA-fin-1810



KERN MBA-A01

Versio 1.0 2018-08

Käyttöohje

Mekaaninen pituusasteikko

1 Tekniset tiedot

| KERN (tyyppi) | TMBA-A01-A |
|----------------------|-------------------|
| Malli | MBA-A01 |
| Mittausalue | 30–80 cm |
| Tarkkuus | 1 mm |
| Toleranssi | 5 mm |
| Mitat (L x K x S) mm | 850 x 240 x 60 mm |
| Nettopaino | n. 800 g |

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Voimassaoleva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tästä:

www.kern-sohn.com/ce

3 Rakenne



1. Asteikko
2. Päänoja
3. Liukukappale/jalansija

4 Yleistä



⇒ Ennen laitteen asettamista ja käynnistämistä lue huolellisesti tämä käyttöohje, vaikka teillä olisi jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.



Turvaehdot

- Noudata käyttöohjetta.
- Käytä ainoastaan asteikon kanssa toimitettuja asennustarvikkeita.
- Siirtämällä rajoitinta on vältettävä tutkittavan henkilön loukkaamista.
- Pituuden mittaus on luotettava ainoastaan edellyttäen, että kantapäät, selkä ja pää on suoristautunut. Huomioi kuitenkin, että päivän aikana ihmisen pituus voi vaihdella muutaman senttimetrin verran.

Mittauslaitteiden n valvonta

- Suosittelemme tarkistamaan mitta-asteikon tarkkuuden, sillä ihmisen pituuden mittauksiin aina liittyy suuri toleranssi.

5 Purkaminen pakkauksesta/asennus



Vastaanottotark astus

Paketin vastaanoton yhteydessä pakkaus on tarkistettava välittömästi mahdollisten vaurioiden varalta - sama pätee laitteeseen, kun se on purettu pakkauksesta.

Pakkaus / palautuslähetys


Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä mahdollisen palautuslähetysten varalta. Laitteen voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessaan.

6 Pituuden mittaus

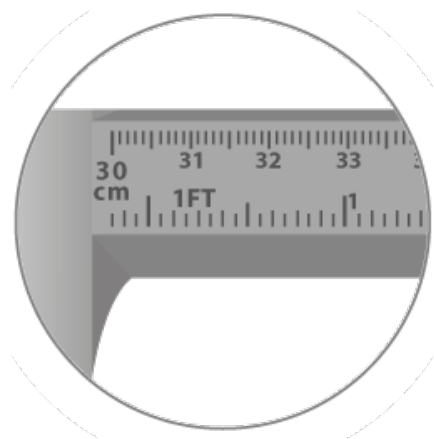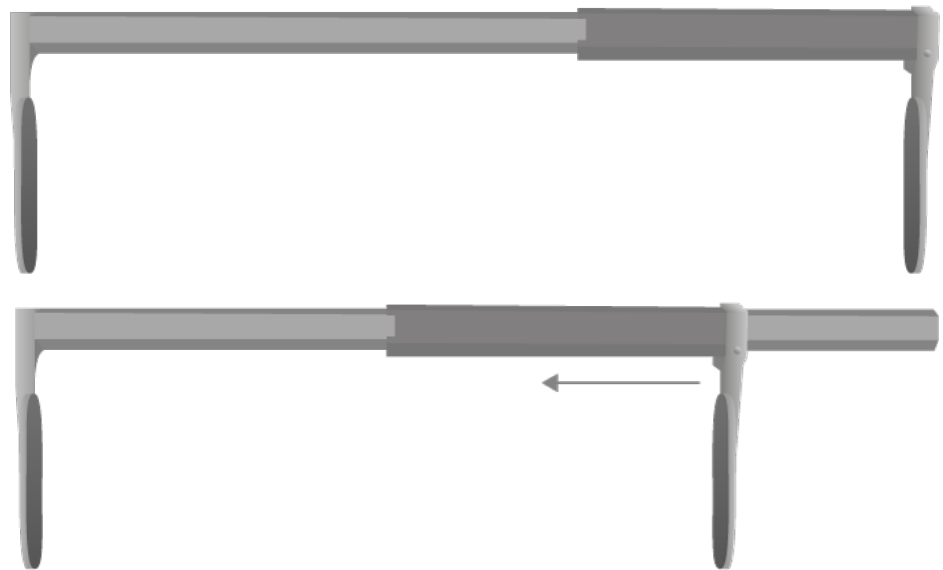


Kiinteä rajoitin

min. 30 cm

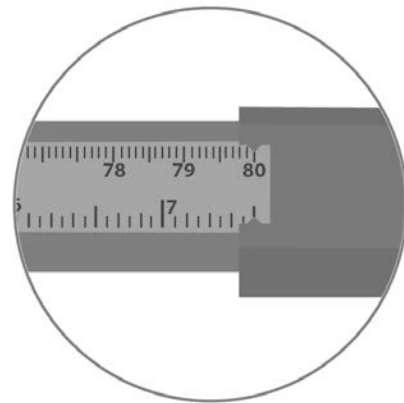

Liukurajoitin

max. 80 cm

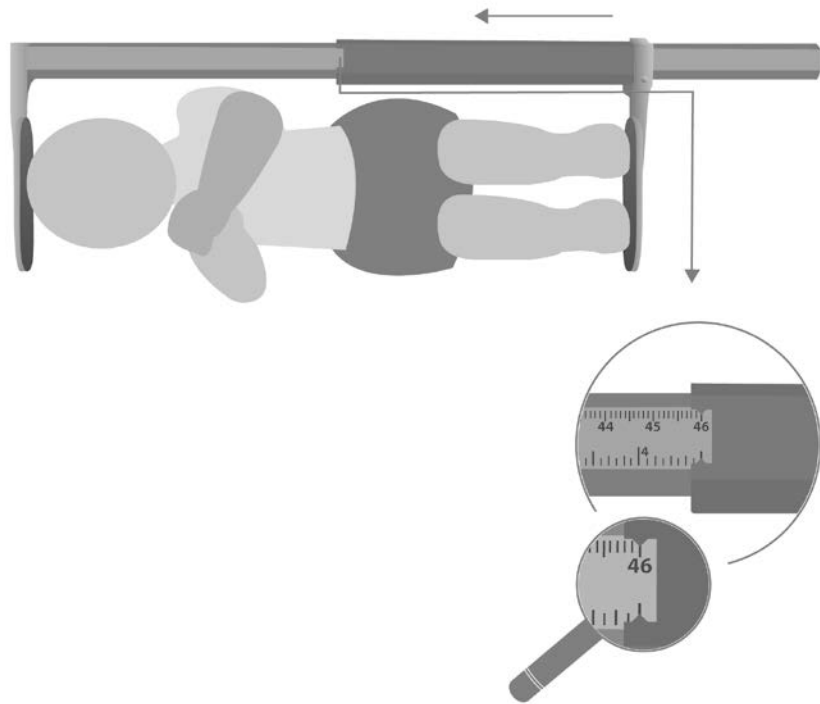

- ⇒ Vauvan pään tulee olla asetettu kiinteää rajoitinta vasten.
- ⇒ Siirrä liukurajoitinta ja nojaa se jalkateriä vasten kuvan mukaisesti.
- ⇒ Lue pituusarvo.

7 Huolto, puhdistus ja hävitys

| | |
|---------------------|--|
| Puhdistus | Pituusasteikkoa on puhdistettava taloudenpitoon tarkoitetulla puhdistusaineella tai yleisellä desinfiointiaineella, esim. 70% isopropanolilla. Suosittelemme käyttämään kosteapyyhkäisyyn tarkoitettua desinfiointiainetta. Noudata valmistajan ohjeita. |
| Desinfiointi | Ei saa käyttää hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten pirtua, bensiiniä tai vastaavia aineita, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa. |
| Sterilointi | Laitteen sterilointi ei ole sallittu. |
| Hävitys | Pakkauksen ja pituuden mittausasteikon hävitys on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevien kansallisten tai alueellisten lainmääräyksien mukaisesti. |