



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Telefono: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per uso Scala meccanica per misurazione di altezza

KERN MBA-A01

Versione


1.0

2018-08

I



MBA-A01-BA-i-1810

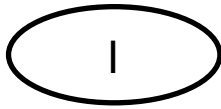

KERN MBA-A01

Versione 1.0 2018-08

Istruzioni per uso

Scala meccanica per misurazione di altezza

1 Caratteristiche tecniche

KERN (tipo)	TMBA-A01-A
Modello	MBA-A01
Intervallo di misurazione	30–80 cm
Divisione elementare	1 mm
Tolleranza	5 mm
Ingombri (L x A x P) mm	850 x 240 x 60 mm
Peso netto	ca 800 g

2 Dichirazione di conformità

L' attuale dichiarazione di conformità CE/UE è disponibile all'indirizzo:

www.kern-sohn.com/ce

3 Panoramica del dispositivo



1. Scala
2. Branca mobile
3. Cursore di misura/poggiapiedi

4 Linee guida basilari (informazioni generali)



⇒ Prima del posizionamento e l'avviamento del dispositivo occorre leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni per uso, anche se avete già un'esperienza con le bilance d'azienda KERN.



Linee guida di sicurezza

- Attenersi alle istruzioni per uso.
- Usare esclusivamente i materiali per montaggio forniti insieme con la scala.
- Spostando il cursore della scala bisogna prestare attenzione a che la persona la cui statura è misurata non riporti lesione di alcun tipo.
- La misurazione di altezza fornisce risultati affidabili solo quando i talloni, la schiena e la testa sono retti. Con ciò bisogna tener conto del fatto che durante la giornata l'altezza di una persona può cambiare di alcuni cm.

Supervisione dei mezzi di controllo

- È consigliabile verificare attraverso la misurazione la precisione della scala per misurazione della statura, in quanto la determinazione di altezza delle persone è sempre affetta da una grande imprecisione.

5 Disimballaggio/montaggio



Controllo in accettazione

Immediatamente dopo la ricezione del pacco occorre verificare se esso non abbia eventuali danni esterni visibili; lo stesso riguarda la scala per misurazione di statura, una volta sballata.

Imballaggio / trasporto di ritorno


Bisogna conservare tutte le parti dell'imballaggio originale per il caso di eventuale trasporto di ritorno. Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.

6 Misurazione di altezza

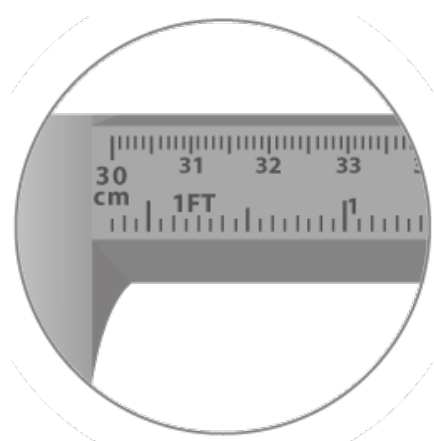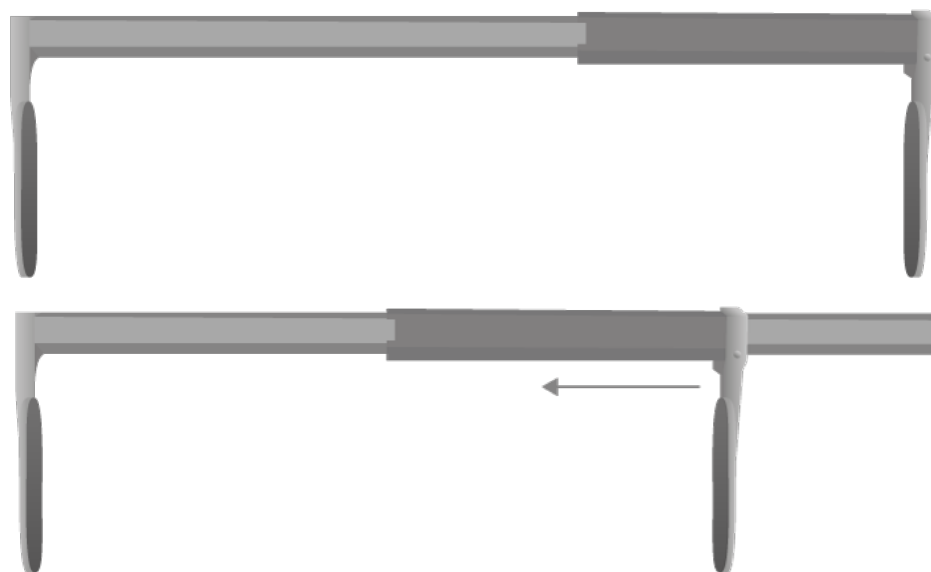


Limitatore fisso

min. 30 cm

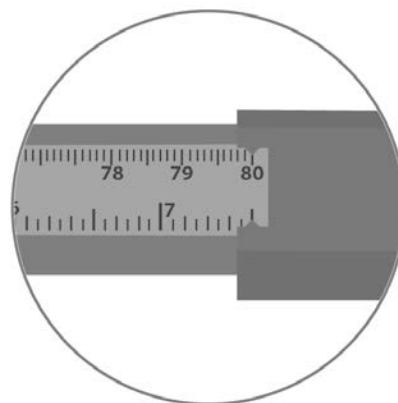

Limitatore spostabile

mass. 80 cm

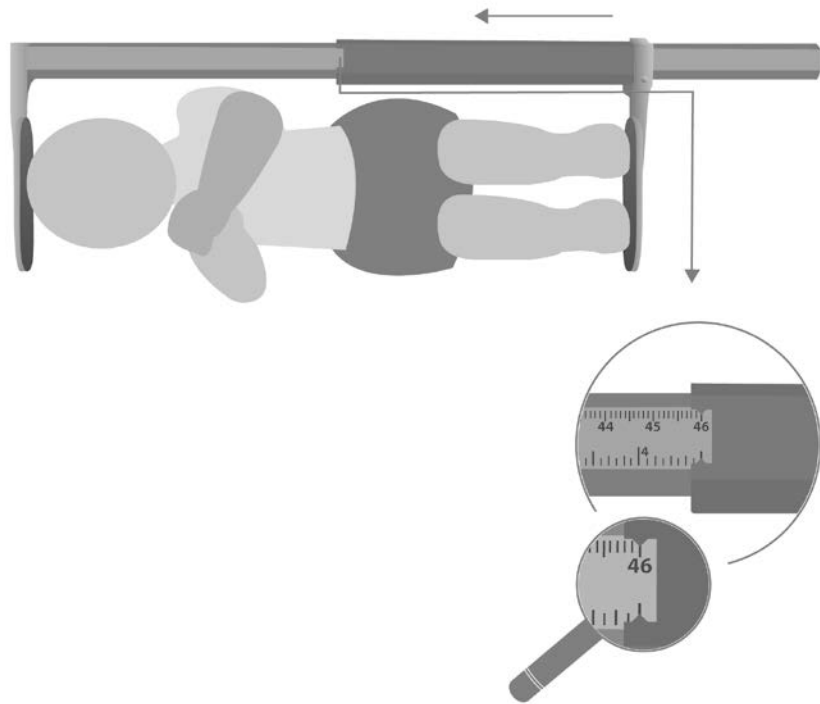

- ⇒ Mettere un neonato a giacere in modo che la sua testa sia poggata presso il limitatore fisso.
- ⇒ Spostare il cursore di misurazione poggiandolo contro i piedi, come da figura.
- ⇒ Leggere il valore di altezza.

7 Pulizia, manutenzione e smaltimento

Pulizia
Disinfezione

Pulire la scala per misurazione di statura esclusivamente con un detergente destinato ad uso domestico o con un disinfettante disponibile nel commercio, p.es. con una soluzione al 70 % d'isopropanolo. Si raccomanda di usare il disinfettante destinato alla disinfezione con il metodo di pulizia della superficie a umido. Rispettare le raccomandazioni del produttore.

Non usare i lucidanti o i prodotti di pulizia aggressivi quali spirito, benzina o simili, in quanto potrebbero danneggiare la superficie di alta qualità.

Sterilizzazione

È vietata la sterilizzazione del dispositivo .

Smaltimento

Bisogna effettuare lo smaltimento della scala per la misurazione della statura e del suo imballaggio in conformità alla legge nazionale o regionale vigente nel posto dell'esercizio del dispositivo.